


OD-E02 アルミクラッチ杖 取扱説明書

この度は、弊社製品をお買いあげいただきまして、ありがとうございます。正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書をかならずお読みください。また、読まれたあとは大切に保管してください。

特長

- 肘と手の2ヵ所で支えるので、1本杖では心配な方でも安心してお使いいただけます。
- 高さは10段階に調節できます。


各部の名称と製品仕様

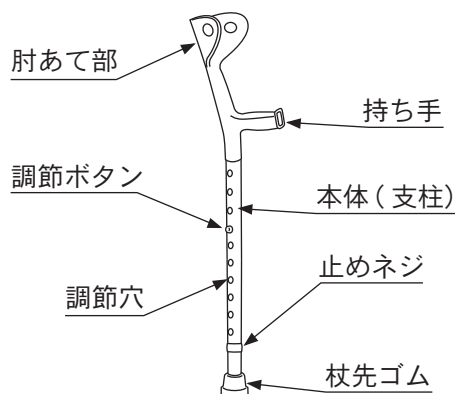

品番	OD-E02
全長サイズ	96 ~ 119cm
重量	505 g
材質	本体：アルミ 持ち手：ポリプロピレン 杖先ゴム：合成ゴム

長さの調節方法

持ち手が腰の位置にくるぐらいが適度な長さの目安です。

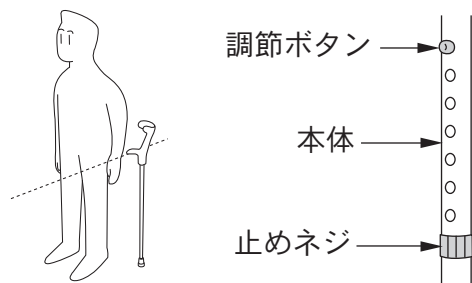


- 1 止めネジを回してゆるめてください。
- 2 調節ボタンを押しながら本体を上下させ、適度な長さに調節してください。
- 3 止めネジを確実に締めてください。

▲注意

- 調節ボタンと止めネジが確実に固定されているか、かならず確認してください。
- 指などをはさまないように注意してください。

使用上の注意

- この製品は歩行を補助するためのものですので、他の用途（例えば登山・護身など）には使用しないでください。
- 使用前に各部を点検してください。また杖先ゴムが磨耗してきたり、劣化してはずれやすくなったりした場合は早めに交換してください。
- 身体に合った高さに調節してから使用してください。
- 肘をかならず肘あて部に当てて、持ち手を握ってください。誤った握り方で使用すると転倒し怪我をするおそれがあります。
- 使用中も、支柱が確実に固定されていること、止めネジにゆるみがないことなどを時々確認してください。
- 濡れたり凍ったりして滑りやすくなっている路面や、傾斜している場所では十分注意してください。
- 道路の側溝や凹みがある箇所では杖先がはまり込む場合があるため、十分注意してください。
- 分解・修理は弊社サービス員以外、行わないでください。

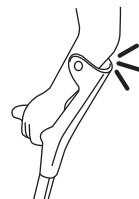

ご使用後および保管方法

- 使用後は、杖先ゴムの底についた砂などを取り除いてください。
- お子さまの手の届かない所に、保管してください。

製品に関して不明な点や不都合なことがございましたら、ご購入販売店もしくは弊社カスタマーサポートにご連絡ください。

福祉用具総合メーカー

株式会社 幸和製作所

〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町3丁159番地1

【カスタマーサポート】10時～17時(土・日・祝日を除く)

0120-508-058

フリーコール フリーコール コーワ オーコーワ

<http://www.tacaof.co.jp>